







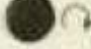



Bedieningsoverzicht Nova-Blend iD en iD-plus

	<p>Naaldhoudersnoer met Ejector naaldhouder</p>  <p>Niet strak opwikkelen om naaldhouder</p>	<p>Handelektrode met snoer</p>  <p>Alleen nodig bij gebruik DC (Blend en Iontho)</p>	<p>1 Pedaal</p>  <p>2^e Pedaal optioneel voor Blendtechniek met 2 pedalen</p>	<p>Adapter AC/AC ~230V/~11,5V</p>  <p>Aansluiten achterzijde apparaat</p>
---	--	---	--	--

Electrolyse (DC)		Thermolyse (HF)		Symbolen	LCD kleurschermen	Programmatoets	Output
Gelijkstroom instellen ...mA			HF/RF wisselstroom	 HF Wisselstroom  DC Gelijkstroom  UN --  T/H Tijd in sec.	Diathermie Blend Kataforese + Desincrustatie -	Om naar volgende scherm/functie te gaan	Aansluiten snoeren: Boven: Handelektrode Onder: Naaldhouder
Pedaalaansluiting			Instellen HF Pedaalaansluiting				
Pedaal wel nodig bij: Ionthoforese Kataforese Desincrustatie Soft Meso Tijdens het geven van stroom moet DC hoger zijn dan 0.20mA Optie: 2 ^e pedaal voor Blenden met 2 pedalen	Pedaal altijd nodig bij: Blendmethoden Diathermie/Flash RF behandelingen Optie: Scalpel voor Fibromen		Extra mogelijkheden:  Tele's Spin Fibromen Comedo's Milia, enz. Met zowel Diathermie als Blendmethode.	Afkortingen in scherm: HF – Warmte DC – Electrolyse T/H – Tijd per haar Extra op iD-plus: UN – Units haar N/H – Aantal haren T/S – Gewerkte tijd	Blendformule: Aantal units : tijd : 10 = 0,..mA <i>Zie onderstaande tabel</i> Let op! Terugvallen DC naar 0.00 betekent dat er geen gelijkstroom loopt. Dit kan bij Blenden wijzen op een fout of een kabelprobleem.	Handelektrode: Voor Diathermie is het gebruik van een handelektrode niet nodig. Bij gebruik van gelijkstroom, zoals Blend en Iontho is een handelektrode noodzakelijk!	

Units Haar	Blendtabel: Units haar : [tijd x 10] = mA								naald
	6 ^{sec}	8 ^{sec}	10 ^{sec}	12 ^{sec}	14 ^{sec}	16 ^{sec}	18 ^{sec}	20 ^{sec}	
15	0,2	0,2	0,2	0,2					K 2
30	0,5	0,4	0,3	0,25	0,2	0,2			K 2
45	0,75*	0,55*	0,45	0,4	0,3	0,3	0,25	0,25	K 3/4
60	1,00*	0,75*	0,6*	0,5	0,4	0,4	0,35	0,3	K 4/5
80		1,00*	0,8*	0,65*	0,55*	0,5	0,45	0,4	K 5/6

www.nova-blend.nl *) > 0,5 mA wordt electrolyse ook pijnlijk

Diathermie: Naaldhouder met naaldhoudersnoer**De Diathermie methoden kunnen worden verdeeld in vier categorieën, te weten:**

Soft	Hierbij wordt gekozen voor lage standen, zodat de pijnsensitie beperkt is. Standen zijn voor de HF: 1,0 t/m 2,5. Tijden langer dan 10 sec. per haar mogen niet op het examen! Gelet op de resultaten (prijs/prestatie) wordt hier de voorkeur gegeven aan de Blendmethode.
Medium	Traditioneel de meest gekozen werkwijze. Standen voor de H/F zijn vaak 3 t/m 5. Met tijden van ook ongeveer 3 tot 5 seconden, Mannenbaarden langer/hoger. Resultaten zijn goed, maar de methode is relatief pijnlijk.
High/Pulse	Bij de juiste insteek is de angst voor hoge standen onnodig. Standen voor de HF meestal boven 7. Ideale tijd per haar ca 1,5 seconde. Door de korte tijd blijft de pijnsensatie beperkt.
Flash	Hierbij gaat men met stroom in de follikel. Er wordt een korte tijd gebruikt, ongeveer 1,5 tot 4 seconden. Worden geïsoleerde naalden gebruikt, dan kan de naald iets op en neer worden bewogen. Deze methode vereist een hoge vaardigheidsgraad!

HF	4,5	DIATHERMIE
		N/H 23
T/H	3 sec	T/S 8 min
Alleen bij iD-plus		

Blendmethode: Naaldhouder met naaldhoudersnoer + Handelektrode met snoer

Met 1 pedaal	HF: Bepaal pijnpunt en bepaal bij deze stand de benodigde tijd om de haar los te laten komen. DC: Bereken aantal mA en stel in (units haar : tijd : 10 = 0,...mA) of zie tabel achterzijde apparaat. HF + DC: Naald in follikel brengen en pak haar met Blendpincet. Trap pedaal de vastgestelde tijd in. Wanneer de haar loslaat, pedaal los en 2 seconden (Nalogen) wachten , dan naald eruit.
Met 2 pedalen	Sluit beide pedalen aan. <i>Zet het apparaat uit en weer aan, het reset naar 2 pedalen.</i> De DC wordt nu via het electrolyse pedaal bediend.
High speed	Bij het ontwikkelen van "blauwe energie" heeft men ontdekt, dat 80°C de loog 300% effectiever is. Dit kunnen we bereiken met een hogere HF stand. Er is dan sprake van Logen en Coaguleren. Deze techniek kan het beste met een K3 geïsoleerde naald worden uitgevoerd. Kleine op- en neer bewegingen met de naald maken. Let op! Deze methode mag niet op het examen!

Bij het wisselen van 2 pedalen naar 1 pedaal, eerst het 2^e pedaal uit het apparaat, dan apparaat uit en weer aan. Het reset dan naar 1 pedaal.

HF	2,5	BLEND
DC	0,50mA	
UN	60+	N/H 36
T/H	2 sec	T/S 20 min
Alleen bij iD-plus		

Knipperende kaders**iD-plus* Rekenfunctie in Blendscherm**

Afwijken van de exameneisen. Functie wordt wel uitgevoerd.

1. Stel eerst de gewenste tijd in met HF pedaal
2. Stel daarna gewenste units of DC in met blauwe knop

* Upgraden van iD naar iD-plus is ook later nog mogelijk. Dat is 20% meer HF, plus een rekenfunctie, harentellen, gewerkte tijd en meer controlefuncties.

Naalden: K2 is dunste en kortste, oplopend naar K6, de dikste en langste.

Naaldkeuze: **1]** Standaard is RVS, bij gevoelige huid Gold. **2]** Stem naald af op dikte haar (K2 → K6). **3]** Kijk of naald lang genoeg is. Zo niet, kies grotere. Te korte naald en/of te ondiep insteken geeft brandwondjes. Ook stil houden naald is belangrijk. Haar moet uit follikel glijden. Huid blijft egaal (rood). Te lange naald geeft geen problemen.